




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRENE
DANSK (DK)

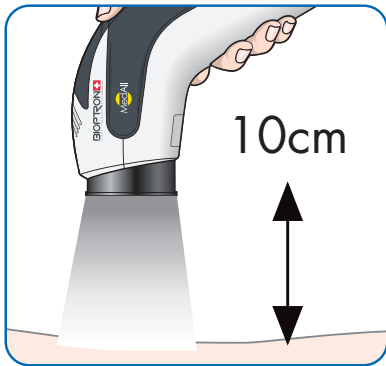

1



2



3



4

HVORDAN ANVENDES DET?

Placer BIOPTRON-enheden med det ønskede filter i en afstand på 10cm, så den dækker det område, du ønsker (Billede 1) at behandle. Ved behandling af områder, der er større end farve filterets diameter, skal de behandles et efter et, i henhold til den anbefalede tid.

HVORDAN UDSKIFTES FILTERET ?

Tag forsigtigt og uden vold, det filter (Billede 2), der skal skiftes, ud, og påsæt det ønskede farvefilter, som angivet i Billede 3. Hold fast i plastik filterets yderring, frem for objektivet.

HVORDAN RENGØRES FILTERET ? (billede 4)

1. Fjern filteret fra enheden, ved at holde fast i plastik filterets yderring.
2. Brug en blød, våd og fnugfri klud, for at undgå at ridse glasoverfladen.
3. Tør filteret af, med en anden tør fnugfri klud.

GARANTI

- 5 år, hvis det anvendes efter anvisningerne, og hvis anvisningerne overholdes.
- Garanti dækker materiale- og fabriktionsfejl.
- Garanti dækker ikke æstetiske ændringer, der skyldes almindelig slitage, og som ikke påvirker produktets ydeevne, eller skader forårsaget af forkert brug af produktet.

ADVARSLER

1. Brug ikke kemikalier (f.eks. isopropylalkohol) til at rengøre den indvendige, eller udvendige side af glasoverfladen, og plastik filterringen.
2. Opbevar filteret i en beskyttende pose, for at forhindre støvansamling og misfarvning, som følge af eksponering for sollys.
3. Filteret er fremstillet af skrøbeligt glas, så det skal håndteres forsigtigt!
4. Brugeren må ikke fjerne filter objektivet.



PMD-ME145-22-DK
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

D A N S K (D K)