




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

F I L T E R S

N E D E R L A N D S (N L)

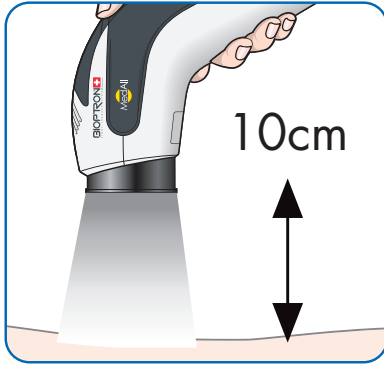

1



2



3



4

HOE TE GEBRUIKEN?

Plaats het BIOPTRON-apparaat met het gewenste filter vanaf een afstand van 10 cm op de zone die u wilt behandelen (Afbeelding 1). Als u gebieden behandelt die groter zijn dan de diameter van het kleurenfilter, moeten deze een voor een worden behandeld volgens de aanbevolen tijd.

HOE VERVANG IK HET FILTER?

Neem het te vervangen filter (Afbeelding 2) voorzichtig en zonder krachtsinspanning uit en plaats het gewenste kleurenfilter zoals aangegeven in Afbeelding 3. Houd de buitenste ring van het filter vast en niet de lens.

HOE REINIG IK HET FILTER? (Afbeelding 4)

1. Verwijder het filter uit het apparaat door de buitenste ring van het filter vast te houden.
2. Gebruik een zachte, natte pluisvrije doek om krassen op het glasoppervlak te voorkomen.
3. Droog het filter met een andere pluisvrije doek.

GARANTIE:

- 5 jaar indien gebruikt zoals bedoeld en indien de waarschuwingen zijn opgevolgd
- Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten
- Deze garantie dekt geen esthetische veranderingen die het gevolg zijn van gewone slijtage die geen invloed hebben op de prestaties van het product of schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van het product.

WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik geen chemicaliën (bijvoorbeeld isopropylalcohol) om de binnen- of buitenkant van het glasoppervlak en de filtering te reinigen.
2. Berg het filter op in een beschermende zak om ophoping van stof en verkleuring door blootstelling aan zonlicht te voorkomen.
3. Het filter is gemaakt van breekbaar glas en moet dus voorzichtig worden behandeld!
4. De gebruiker mag de filterlens niet verwijderen.



PMD-ME145-22-NL
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

N E D E R L A N D S (N L)