




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRY

POLSKI (PL)

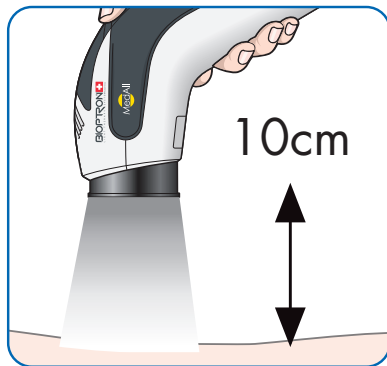

1



2



3



4

SPOSÓB UŻYCIA

W odległości 10 cm, należy ustawić urządzenie BIOPTRON z wybranym filtrem (zdj. 1). Przy naświetlaniu obszaru większych niż objętego działaniem światła, należy naświetlać jeden obszar po drugim zgodnie z zalecanym czasem.

JAK WYMIENIĆ FILTR?

Ostrożnie i bez użycia siły, wyjąć filtr (zdj. 2), który ma być wymieniony i włożyć pożądaný filtr kolorowy, jak pokazano na zdjęciu 3. Trzymać za zewnętrzny pierścień filtra, a nie za obiektyw.

JAK WYCZYŚCIĆ FILTR? (zdjęcie 4)

1. Wyjąć filtr z urządzenia, trzymając za zewnętrzny pierścień filtra.
2. Należy używać miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki, aby uniknąć zarysowania szklanej powierzchni.
3. Osusz filtr inną niestrzępiącą się ściereczką.

GWARANCJA

- 5 lat, jeśli urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i jeśli przestrzegane są zasady z Instrukcji obsługi, (halogen 2 lata)
- Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje zmian estetycznych wynikających ze zwykłego zużycia, które nie mają wpływu na działanie produktu, ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem USUŃ.

OSTRZEŻENIA

1. Nie należy używać żadnych środków chemicznych (np. alkoholu izopropylowego) do czyszczenia wewnętrznej lub zewnętrznej strony powierzchni szklanej i pierścienia filtra.
2. Filtr należy przechowywać w pokrowcu ochronnym, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i odbarwieniom spowodowanym wystawieniem na działanie promieni słonecznych.
3. Filtr wykonany jest z delikatnego szkła, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie!
4. Użytkownik nie może zdejmować soczewek filtrujących.



PMD-ME145-22-PL
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

P O L S K I (P L)