




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRI

SLOVENŠČINA (SI)

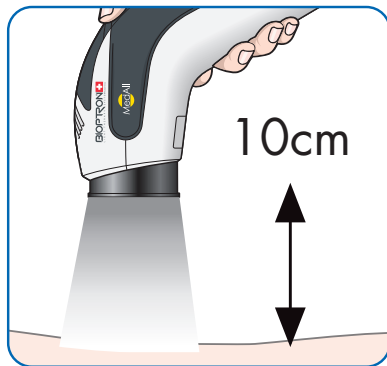

1



2



3



4

NAVODILA ZA UPORABO

Napravo Bioptron z želenim filtrom namestite na razdaljo 10 cm od predela telesa, ki ga želite zdraviti (slika 1). Površine, ki so večje od premera filtra, zdravite eno za drugo v skladu s priporočenim časom.

NAVODILA ZA MENJAVO FILTRA

Filter, ki ga želite zamenjati (slika 2), previdno in brez uporabe sile odstranite in nato vstavite poljubni barvni filter, kot prikazuje slika 3. Filter primite za zunanji obroč filtra in ne za lečo.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE FILTRA (Slika 4)

1. Filter odstranite iz naprave, tako da ga primete za zunanji obroč.
2. Uporabite mehko, vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, da se steklena površina ne opraska.
3. Filter osušite s pomočjo druge krpe, ki ne pušča vlaken.

GARANCIJA

- 5 let, če se uporablja v skladu s predvidenim namenom in ob upoštevanju opozoril
- Ta garancija zajema napake v materialu in izdelavi.
- Ta garancija ne zajema estetskih sprememb, ki so posledica običajne obrabe in ki ne vplivajo na delovanje izdelka, ter poškodbe, nastale zaradi napačne uporabe izdelka.

OPOZORILA

1. Za čiščenje notranje ali zunanje strani steklene površine in obroča filtra ne uporabljajte kemikalij (npr. izopropilnega alkohola).
2. Filter hranite v zaščitni torbici, da preprečite nabiranje prahu in razbarvanje zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi.
3. Filter je izdelan iz lomljivega stekla, zato z njim ravnajte previdno!
4. Uporabnik ne sme odstraniti leče filtra.



PMD-ME145-22-SI
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

SLOVENŠČINA (SI)