




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

F I L T E R I

S R P S K I (S R)

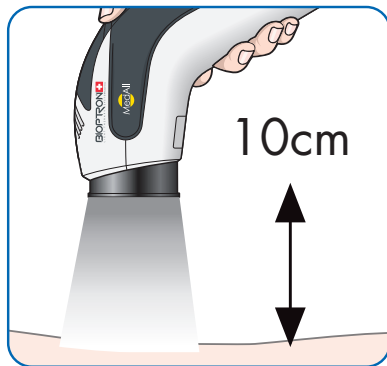

1



2



3



4

KAKO SE KORISTI

BIOPTRON uređaj sa željenim filterom postavite na rastojanju od 10 cm od zone koja se tretira (slika 1). Zone koje su veće od prečnika filtera tretirajte deo po deo u skladu sa preporučenom dužinom tretmana.

ZAMENA FILTERA

Pažljivo i bez primene sile izvadite filter (slika 2) i stavite željeni filter u boji kao što je prikazano na slici 3. Vodite računa da filter držite za spoljašnji prsten, a ne za sočivo.

ČIŠĆENJE FILTERA (slika 4)

1. Izvadite filter iz uređaja držeći ga za spoljašnji prsten.
2. Koristite meku, vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice da ne biste oštetili staklo.
3. Obrišite filter drugom krpom koja ne ostavlja dlačice.

GARANCIJA

- 5 godina, ukoliko se filter koristi u skladu sa njegovom namenom i uz poštovanje mera opreza.
- Garancija obuhvata defekte u materijalu kao i one nastale tokom proizvodnje.
- Garancija ne obuhvata estetske promene usled uobičajenog trošenja i habanja filtera koje ne utiču na njegove performanse, kao ni oštećenja usled pogrešne upotrebe proizvoda.

UPOZORENJA

1. Nemojte koristiti hemikalije (npr. izopropil alkohol) za čišćenje unutrašnje i spoljašnje strane stakla i prstena filtera.
2. Čuvajte filter u zaštitnoj kesici da ne bi došlo do skupljanja prašine i promene boje usled izlaganja svetlosti.
3. Filteri su izrađeni od osetljivog stakla i morate njima pažljivo rukovati!
4. Korisniku nije dozvoljeno da sam skida sočivo sa filtera.



PMD-ME145-22-SR
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

S R P S K I (S R)